

چگونه تست کووید-۱۹ را انجام دهیم.

با استفاده از سایت QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test

در باره

این یک راهنمای ساده برای کیت تست کووید-۱۹ OTC QuickVue At-Home است. برای اطلاعات مکمل، لطفاً به برگه دستورالعمل و برگه اطلاعات بیمار در کیت مراجعه کنید. این محصول دارای مجوز کاربرد اضطراری FDA می باشد.



برای دریافت ویدیو در مورد نحوه انجام تست به سایت ذیل مراجعه کنید

[Quickvueathome.com/#video_testkit-2](https://www.quickvueathome.com/#video_testkit-2)



در کیت (KIT) چیست؟

لوله های از پیش پر شده
نگهدارنده لوله
سواب فوم
نوار های تست
برگه دستورالعمل
برگه اطلاعات بیمار

چی چیز دیگر نیاز دارید؟

ساعت یا زمان سنج (شامل نمی شود)
برای این تست دقیق بودن در مورد زمان بسیار مهم است!




برای شروع آزمایش

دست های خود را شسته و کیت را روی یک سطح صاف و تمیز قرار دهید. مطمئن شوید که در اتاق نور کافی وجود دارد. اگر آزمایش را بالای شخص دیگری انجام می دهید، از ماسک صورت استفاده کنید.
کیت را باز کنید و مطمئن شوید که تمام موارد ذکر شده در بالا وجود دارد. زمان سنج یا ساعت خود را گرفته و دستورالعمل ها را مرحله به مرحله در سمت دیگر دنبال کنید.



انجام تست و یا آزمایش


1: درپوش یکی از لوله ها را بردارید و آن را در نگهدارنده لوله قرار دهید

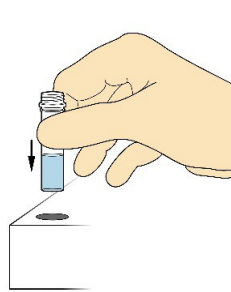

قسمت بالای سواب را لمس نکنید





2 قسمت بسته شده کاغذ را از روی سواب جدا کنید. سر سواب را لمس نکنید

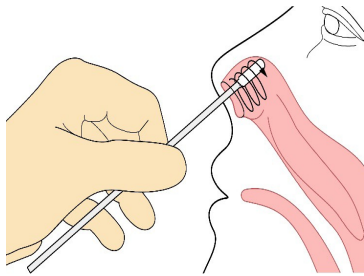


3 سواب را حدود $\frac{1}{2}$ تا $\frac{3}{4}$ اینچ در یک سوراخ بینی فرو کنید و آن را در اطراف دیواره های داخلی بمالید. حداقل 4 بار با استفاده از همان سواب، این کار را در سوراخ دیگر بینی تکرار کنید. این حدود 15 ثانیه طول می کشد

4 بلافاصله پس از گرفتن نمونه از بینی، سواب را در لوله باز قرار دهید. مطمئن شوید که سواب با پایین لوله تماس دارد. سواب را 3 یا 4 بار هم بزنید.

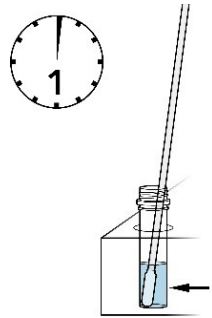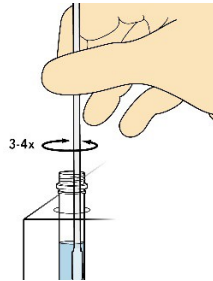

5 سواب را حداقل 1 دقیقه در لوله بگذارید. (زمان سنج یا ساعت استفاده کنید!) اگر شما سواب را بیشتر یا کمتر از حد معین بگذارید ممکن نتایج اشتباهی رخ دهد.

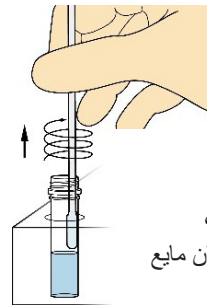


6 پس از 1 دقیقه، سواب را از لوله خارج کنید، سر سواب را به دیواره لوله بمالید تا حد امکان مایع خارج شود. سواب را دور بیندازید.




7 کیسه نوار تست را با دقت باز کنید و نوار تست را با نشانه های رو به پایین در لوله باز قرار دهید. نوار را در لوله به مدت 10 دقیقه ترک کنید. (از زمان سنج یا ساعت استفاده کنید!)

8 بعد از 10 دقیقه نوار تست را از لوله خارج کرده و روی سطح صاف با نور مناسب قرار دهید. بلافاصله نوار تست را بخوانید! اگر برای خواندن آن بیشتر از 5 دقیقه صبر کنید، ممکن است نتایج اشتباه یا نامعتبر دریافت کنید

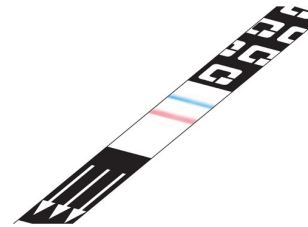

خواندن نتایج آزمون شما

3 نوع نتیجه آزمایش ممکن است: مثبت، منفی یا نامعتبر، آزمایشی که نمی توان از آن استفاده کرد.

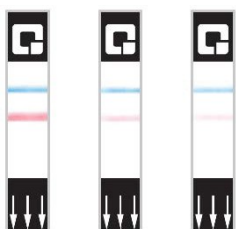

نتیجه مثبت =
1 خط گلابی + 1 خط آبی احتمالاً به COVID-19 مبتلا هستید. شما باید خود را قرنطینه کنید اگر علائمی دارید که شما را آزار می دهد یا نگران می کند، با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود تماس بگیرید.



نتیجه منفی =
1 خط آبی
بعید است که به COVID-19 مبتلا باشید. اما اگر علائمی دارید که شما را آزار می دهد یا نگران می کند، با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود تماس بگیرید.



نتیجه نامعتبر =
1 خط گلابی یا بدون خط شما باید یک آزمایش جدید انجام دهید. دوباره از ابتدا با استفاده از یک لوله، سواب و نوار تست جدید شروع کنید. برای 2 نتیجه نامعتبر، با شماره 1-833-784-2588 تماس بگیرید.