

Unsaon Pag-gamit sa COVID-19 Test


Gamit ang *QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test*

Mahitungod sa



Kini usa ka gipasayon nga giya alang sa *QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test* kit. **Para sa maong kompletong impormasyon**, palihug tan-awa ang **Instruction Sheet** ug ang **Patient Fact Sheet** sa sulod ani nga kit. Kini nga produkto adunay FDA Emergency Use Authorization.



Alang sa video unsaon pag-gamit sa maong test, adto sa quickvueathome.com/#video_testkit-2

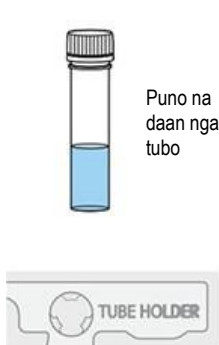

Kaptan sa tubo

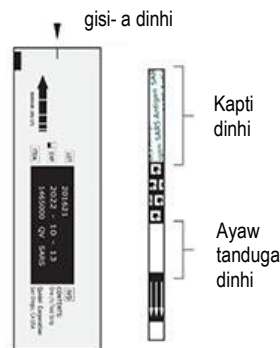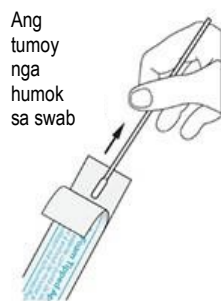


Pagsulay nga strips

UNSAY ANAA SA KIT?

Puno na daan nga tubo
Kaptan sa tubo
Ang tumoy nga humok sa swab
Pagsulay nga strips
Papel sa pamaagi
Kamatuorang inpormacion para sa paseynte

UNSA PA IMONG KINAHANGLAN?

Orasan or Relo (walay apil)
Ang maong sako sa oras
importante kaayo sa pag-gamit sa test!

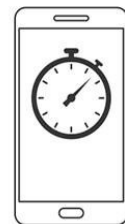

SA PAGESUGOD SA TEST


Hugasi ang mga kamot ug ibutang ang kit sa **patag ug limpyo nga lamesa**. Siguroha nga adunay saktong **suga o kahayag** ang sulod sa kwarto. Kung ikaw ang mag buhat ug test para sa laing tao, pag-gamit ug **face mask**.

Ablihi ang kit ug siguroha nga ang tanang butang nga gilista sa ibabaw anaa. **Kuhaa ang orasan or relo** ug **sunda ang mga sumunod na instruksyon** sa pikas kilid.

Pag-gamit sa Test

1


Kuhaa ang takup gikan sa usa sa mga tubes ug ibutang kini sa tube holder.

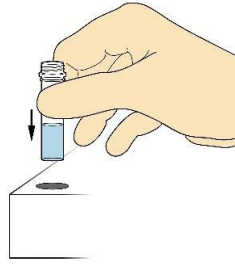

AYAW TANDUGA AND ULO SA SWAB


2

Ablihi ang wrapper sa swab. Ayaw hikapa ang ulo sa swab.

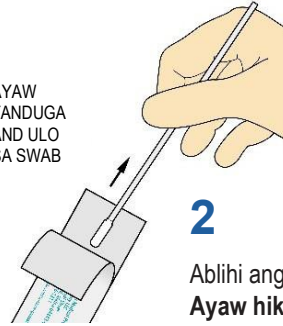


3

Isulod ang swab 1/2 to 3/4 pulgada sa usa sa imong ilong ug ipahid kini sa palibot sa sulod, upat ka beses (4 times). Gamit ang parehong swab, isulod usab kini sa pikas ilong. Manginahanglan kini ug mga 15 segundos.

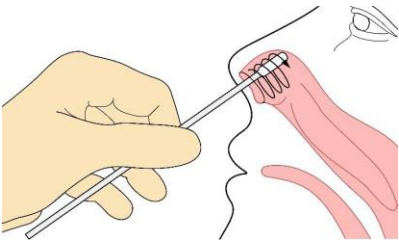


4

Human makuha ang sample gikan sa ilong, ibutang ang swab sa tube. Siguroha nga ang swab niabot sa ubos sa tube. Kutawon ang swab 3 or 4 ka beses.

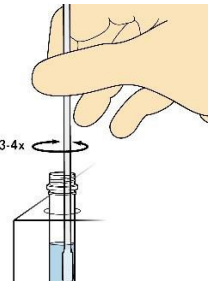

5


Pasagdae ang swab sa tube sulod sa 1 minuto. (Gamit ang Orasan or Relo!) Mahimong mahitabo ang sayop nga mga resulta kon mo sobra o mo kulang ang paghumol ang swab.

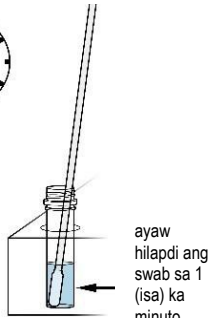

ayaw hilapdi ang swab sa 1 (isa) ka minuto

6

Pagkahuman sa 1 minuto, kuhaa ang swab gikan sa tube, ipahid ang swab sa palibot sa tube aron mapuga ug mogawas ang daghang likido kutob sa mahimo. Ilabay ang swab.

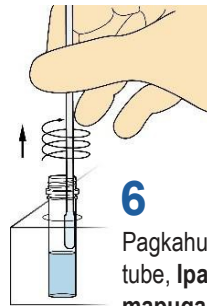


7

Ablihi pag-ayo ang Test Strip pouch ug ibutang ang Test Strip sa tube. Sunda ang picture sa kilid, ang arrow naka humol. Pasagdae ang strip sa tube sulod sa 10 minuto. (Gamit ang Orasan or Relo!)



biya-i ang strip sa 10 (napulo) ka minuto

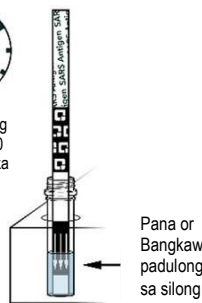

Pana or Bangkaw padulong sa silong


8

Pagkahuman sa 10 minuto, kuhaa ang Test Strip sa tube ug ibutang sa patag nga surface nga adunay maayong suga o hayag. Basaha dayon ang Test Strip! Mamahimong sayop o invalid ang resulta kon madugay sa pagbasa paghuman sa 5 minuto.



Pagbasa sa Resulta sa imong Test

Adunay tulo (3) ka posible na resulta sa test: **Positibo**, **Negatibo** or **Invalid**, test nga dili pwedi magamit.

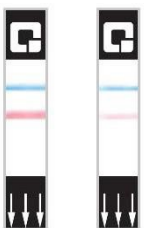

POSITIBO RESULT = 1 pink line + 1 blue line
Mahimong adunay COVID-19. Kinahanglang ang **self-isolate**. Kon adunay sintomas nga nasinati kontakta imong healthcare provider.



NEGATIBO RESULT = 1 blue line
Mahimong walay COVID-19. Pero kung adunay sintomas nga nasinati kontakta imong health care provider.



INVALID RESULT = 1 pink line or NO lines
Kinahanglang mag test pag usab. Gamit ang bag-ong Swab, Tube ug Test Strip.
For 2 invalid results, call 1-833-784-2588.