

ວິທີກວດຫາເຊື້ອ ໂຄວິດ-19


ນຳໃຊ້ຊຸດກວດ QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test

ກ່ຽວກັບ

ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳທີ່ຖ່າຍດ້ວຍສຳລັບຊຸດກວດ QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test. ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນ, ກະລຸນາອີງໃສ່ ເອກະສານແນະນຳ ແລະ ເອກະສານຂໍ້ມູນຄົ້ນຄວ້າທີ່ຢູ່ໃນຊຸດກວດ. ຜະລິດຕະພັນນີ້ມີ FDA ການໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນອະນຸມັດ.



ສຳລັບວິດີໂອແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການກວດ, ໃຫ້ໄປທີ່ quickvueathome.com/#video_testkit-2

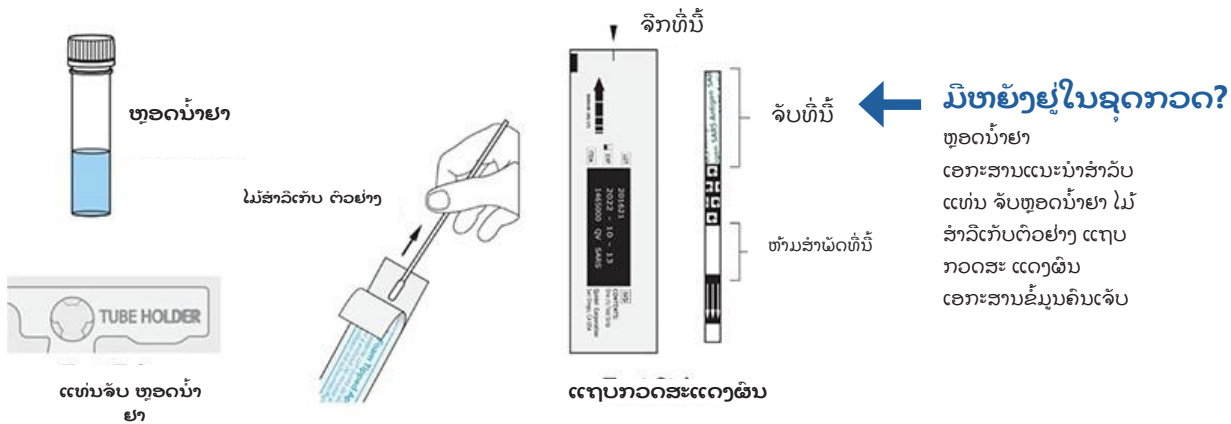

ທ່ານຕ້ອງການຫຍັງເພີ່ມເຕີມບໍ?
ໂມງ ຫຼື ໂມງຈັບເວລາ (ບໍ່ລວມ)
ຄວາມແນ່ນອນກ່ຽວກັບເວລາແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ
ສຳລັບການກວດໃນຄັ້ງນີ້!




ເພື່ອເລີ່ມການກວດ

ວັງມືໃຫ້ສະອາດ ແລະ ອາດຊຸດກວດໃສ່ເທິງພື້ນຜິວທີ່ ຮາບພຽງ ແລະ ສະອາດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີ ແສງສະຫວ່າງທີ່ດີໃນຫ້ອງ. ຖ້າທ່ານກຳລັງກວດໃຫ້ຜູ້ອື່ນ, ໃຫ້ສອມໃສ່ເຫນື້າກາກອະນາໄມ. ເປີດຊຸດກວດ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລາຍການທັງໝົດທີ່ລະບຸໄດ້ຂ້າງເທິງແມ່ນມີຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ມີໂມງຈັບເວລາ ຫຼື ໂມງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນໜ້າຕໍ່ໄປ.

ດຳເນີນການກວດ

1

ເປີດຝາອັດຫຼອດນ້ຳຢາຈາກໜຶ່ງໃນສອງຫຼອດອອກ ແລ້ວເອົາຫຼອດນ້ຳຢາໄປວາງໃສ່ ແທ່ນຈັບຫຼອດນ້ຳຢາ.

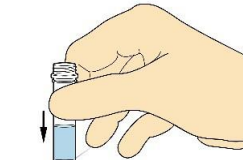

ຫ້າມຈັບຫົວໄມ້ສາວິເກັບຕົວຢ່າງ.


2

ຈັກຫໍ່ບັນຈຸເພື່ອເປີດໄມ້ສາວິເກັບຕົວຢ່າງ ອອກ. ຫ້າມຈັບຫົວໄມ້ສາວິເກັບຕົວຢ່າງ.




3

ສອດໄມ້ສາວິເກັບຕົວຢ່າງເລິກປະມານ 1/2 ຫາ 3/4 ນິ້ວ ເຂົ້າໄປໃນຮູດັງເບື້ອງໜຶ່ງ ແລ້ວໝຸນອ້ອມໃສ່ງັດຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຮອບ. ໃຊ້ໄມ້ສາວິເກັບຕົວຢ່າງອັນເດີມ, ເຮັດເໝືອນກັນກັບຮູດັງອີກເບື້ອງໜຶ່ງ. ນີ້ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 15 ວິນາທີ.

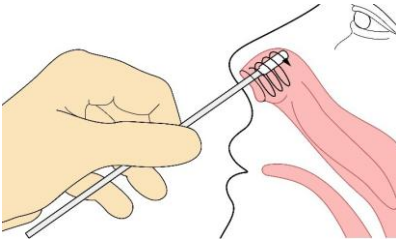

4

ທັນທີຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຕົວຢ່າງຈາກດັງ, ເອົາໄມ້ສາວິເກັບຕົວຢ່າງເຂົ້າໄປໃນຫຼອດນ້ຳຢາ ທີ່ເປີດຢູ່. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄມ້ສາວິເກັບຕົວຢ່າງແມ່ນຖືກຈຸມລົງຈຳພື້ນຫຼອດນ້ຳຢາ. ໝຸນໄມ້ສາວິເກັບຕົວຢ່າງ 3 ຫຼື 4 ຮອບ.

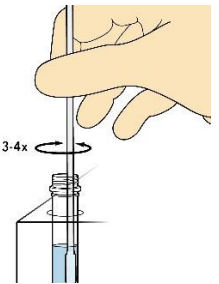


5

ຈຸມໄມ້ສາວິເກັບຕົວຢ່າງລົງໃນຫຼອດນ້ຳຢາ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ນາທີ. (ໃຊ້ໂມງຈັບເວລາ ຫຼືໂມງ!) ຜົນກອດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຖ້າຫາກທ່ານຈຸມໄມ້ສາວິເກັບຕົວຢ່າງ




ໃນເວລາສັ້ນເກີນໄປ ຫຼືດົນເກີນໄປ.

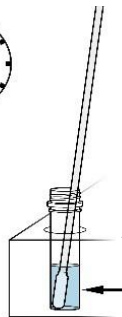

6

ຫຼັງຈາກ 1 ນາທີ, ເອົາໄມ້ສາວິເກັບຕົວຢ່າງອອກຈາກຫຼອດນ້ຳຢາ, ຖືຫົວສາວິເກັບຕົວຢ່າງກັບຝາຂອງຫຼອດນ້ຳຢາເພື່ອບິບນ້ຳອອກໃຫ້ຫຼາຍ ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຖ້າໄມ້ສາວິເກັບຕົວຢ່າງ.

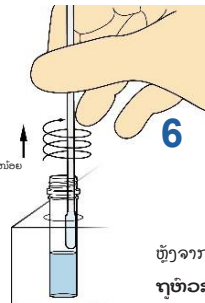


7

ເປີດແຖບກອດສະແດງຜົນຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະເອົາແຖບກອດສະແດງຜົນຈຸມເຂົ້າ ໄປໃນຫຼອດນ້ຳຢາທີ່ເປີດຢູ່ ໂດຍມີລູກສອນຊີລົງລຸ່ມ. ປະແຖບກອດສະແດງຜົນໄດ້ໃນຫຼອດນ້ຳຢາເປັນເວລາ 10 ນາທີ. ໂມງຈັບເວລາ ຫຼືໂມງ!)



ປະແຖບກອດສະແດງຜົນໄດ້

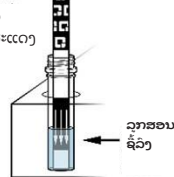

8

ຫຼັງຈາກ 10 ນາທີ, ເອົາແຖບກອດສະແດງຜົນອອກຈາກຫຼອດນ້ຳຢາ ແລະວາງລົງເທິງຜິວທີ່ຮາບພຽງ ແລະມີແສງສະຫວ່າງດີ. ອ່ານແຖບກອດສະແດງຜົນທັນທີ! ຖ້າທ່ານວ່າຖ້າດົນກວ່າ 5 ນາທີເພື່ອອ່ານຜົນ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນທີ່ຜິດພາດ ຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງ.



ອ່ານຜົນກວດຂອງທ່ານ

ຜົນກວດມີ 3 ປະເພດທີ່ເປັນໄປໄດ້: ບວກ, ລົບ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຜົນກວດບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.



ຜົນກວດເປັນບວກ = 1 ເສັ້ນສີເຂັ້ມ + 1 ເສັ້ນສີເຂັ້ມ
ທ່ານ ມີແນວໂນ້ມ ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19. ເຈົ້າຄວນແຍກປ່ຽວຕ້ານເອງ ຖ້າທ່ານມີອາການທີ່ລົບກວນ ຫຼືກັງວົນຕໍ່ທ່ານ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງ ທ່ານ.



ຜົນກວດເປັນບວກ = 1 ເສັ້ນສີເຂັ້ມ
ທ່ານ ຄົງຈະບໍ່ມີ ເຊື້ອ ໂຄວິດ-19. ຖ້າທ່ານມີອາການທີ່ລົບກວນ ຫຼືກັງວົນຕໍ່ທ່ານ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງທ່ານ.



ຜົນກວດບໍ່ຖືກຕ້ອງ = 1 ເສັ້ນສີເຂັ້ມ ຫຼື ບໍ່ມີເສັ້ນ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງ ໄດ້ກວດຄືນໃໝ່. ເລີ່ມການກວດອີກຄັ້ງຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມ ຕົ້ນ ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼອດນ້ຳຢາ, ໄມ້ສາວິເກັບຕົວຢ່າງ, ແລະແຖບ ກອດສະແດງຜົນຊຸດໃໝ່. ສຳລັບຜົນກວດ 2 ຄັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ໃບຫາ 1-833-784-2588.