

د COVID-19 ازموینه څنگه ترسره کړئ

د QuickVue At-Home OTC COVID-19 تیسټ کارول

په اړه

دا د QuickVue At-Home OTC COVID-19 تیسټ کټ لپاره ساده لارښود دی. د بشپړو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ په کټ کې د لارښوونې پاڼه او د ناروغ حقیقت پاڼه وگورئ. دا محصول د FDA بیروني استعمال لري واک ورکول.



د ازموینې څرنگوالي په اړه د ویډیو لپاره ، لارښی
[Quickvueathome.com/#video_testkit-2](https://www.quickvueathome.com/#video_testkit-2)

په کټ کې څه دي؟

مخکې ډک ټیوبونه
د ټیوب هولډر
فوم سویب تیسټ
سټریپ
لارښوونې پاڼه
د ناروغ حقیقت پاڼه



تاسو نور څه ته اړتیا لرئ؟

واچ یا ټایمر (شامل نه دی)
د وخت په اړه دقیق کیدل خورا مهم دي
د دې ازموینې لپاره!




د ازموینې پیل کول

خپل لاسونه ومینځئ او کټ په فلیټ او پاک سطح کې ځای په ځای کړئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې شتون لري
په خونه کې ښه رڼا. که تاسو د بل چا ازموینه کوئ، د مخ ماسک وکاروئ.
کټ خلاص کړئ او ډاډ ترلاسه کړئ چې پورته لیست شوي ټول توکي شتون لري.
خپل ساعت یا ساعت ترلاسه کړئ.
او په بل اړخ کې ګام په ګام لارښوونې تعقیب کړئ.

ازمونه ترسره کول


1
کیپ له یو ټیوب څخه لرې کړئ او د ټیوب هولډر کې یې واچوئ.

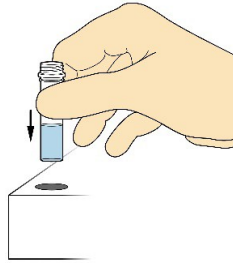


د سویب سر ته لاس مه ورکوئ



2
پوټکی له سویب څخه خلاص کړئ.
د سواب سر ته لاس مه ورکوئ.

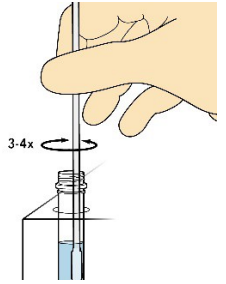


3
په یوه پزه کې له 1/2 څخه تر 3/4 انچه پورې سویب دننه کړئ او د دننه دیوالونو شاوخوا یې ومینځئ
لږترلږه 4 ځله. د ورته سویب په کارولو سره، په بل پوزې کې تکرار کړئ. دا به شاوخوا 15 ثانیې ونیسي.

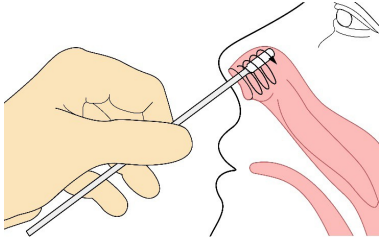


4
د پوزې څخه د نمونې تر لاسه کولو وروسته، سویب په خلاص ټیوب کې واچوئ. ډاډ تر لاسه کړئ چې سویب د ټیوب لاندې لمس کوي. 3 یا 4 ځله سویب وخورئ.

5
لږ تر لږه د 1 دقیقو لپاره سویب په ټیوب کې پریردئ. (استعمال ټایمر یا واچ!) غلط پایلې کیدې شي که تاسو د ډیر لنډ یا ډیر وخت لپاره پریردئ.

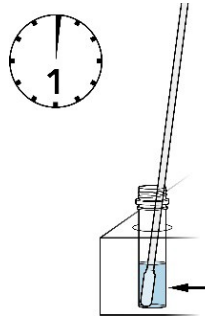

لږ تر لږه په 1 دقیقو کې سویب پریردئ


6
د 1 دقیقو وروسته، سویب د ټیوب څخه وباسئ، د ټیوب دیوال سره د سویب سر مسح کول ترڅو د امکان تر حده ډیر مایع وباسي. سویب لرې وغورځوئ.

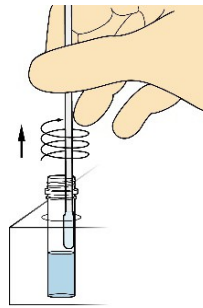

7
د ټیسټ سټریپ کڅوړه په احتیاط سره پرانیږئ او د ټیسټ سټریپ په خلاص ټیوب کې د تیر په نښه کولو سره واچوئ. پټه پریرده
په ټیوب کې د 10 دقیقو لپاره. (ټایمر یا واچ وکاروئ!)




لږترلږه تر 10 دقیقو لپاره پټه پریردئ

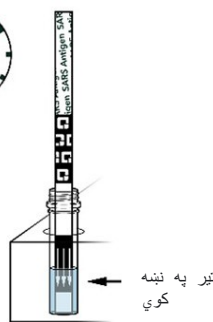


تیر په نښه کوي

8
د 10 دقیقو وروسته، د ټیسټ پټه له ټیوب څخه وباسئ او د نښه رڼا سره یې په فلیټ سطح کې واچوئ. د ازمونې پټه ولولئ
سمدلاسه! که تاسو د لوستلو لپاره له 5 دقیقو څخه ډیر انتظار وکړئ، تاسو ممکن غلط یا غلط پایلې تر لاسه کړئ.

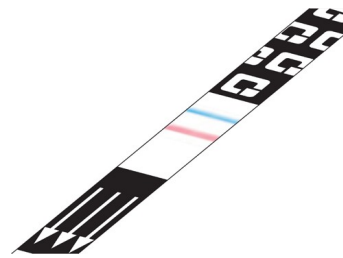

ستاسو د ازمونې پایلې لوستل

د ازمونې 3 ډوله پایلې ممکن دي: مثبت، منفي یا ناباوره، یوه ازمونه چې نشي کارول کیدی.

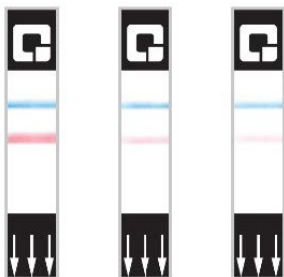

مثبته پایله =
1 کلابي کرښه + 1 نیلي کرښه
تاسو احتمال لرئ COVID-19 ولرئ. تاسو باید ځان جلا کړئ. که تاسو داسې نښې ولرئ چې تاسو ځوروي یا اندېښنه لرئ، د خپل روغتیا پاملرنې چمتو کونکي سره اړیکه ونیسئ.



منفي پایله =
1 نیلي کرښه
تاسو احتمال نلري چې COVID-19 ولرئ. مګر که تاسو داسې نښې ولرئ چې تاسو ځوروي یا اندېښنه لرئ، د خپل روغتیا پاملرنې چمتو کونکي سره اړیکه ونیسئ.



ناسمه پایله =
1 کلابي کرښه یا NO کرښې
تاسو اړتیا لرئ یوه نوي ازمونه وکړئ. په پیل کې بیا د نوي ټیوب، سویب او ازمونې پټې په کارولو سره پیل کړئ. د 2 غلط پایلو لپاره، 1-833-2588-784 ته زنګ ووهئ.