

# 怎样做新冠病毒测试


## 使用 QuickVue家用新冠病毒自测盒

### 有关须知

这是一个使用QuickVue家用新冠病毒自测盒的使用指南。请查看盒内“使用说明书”及“病人须知”。该产品已通过FDA 授权，可于紧急情况下进行新冠病毒测试。



观看怎样使用测试盒视频，请前往以下链接  
[quickvueathome.com/#video\\_testkit-2](https://quickvueathome.com/#video_testkit-2)

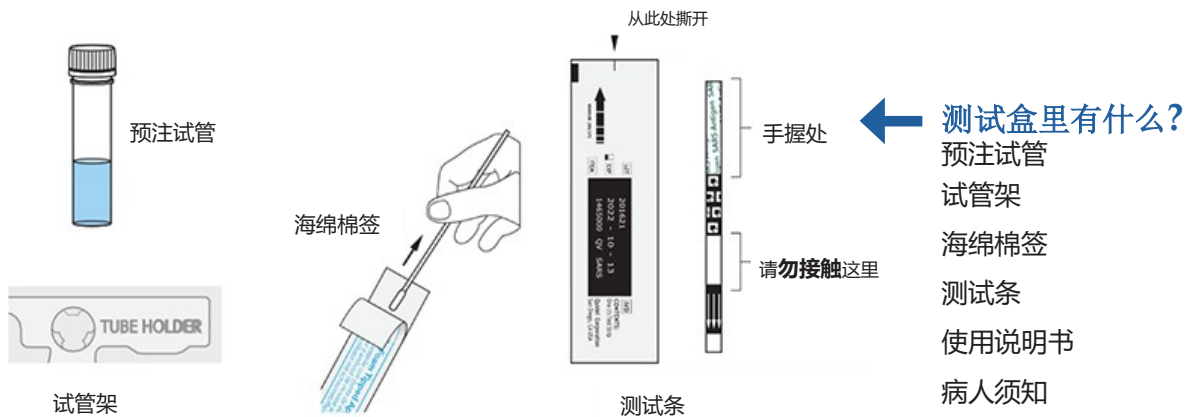

**您还需要什么?**  
钟表或计时器 (自测盒内不含)  
**测试时严格按照要求时间造作非常关键!**



### 开始测试

请洗干净双手，将测试盒放于平坦及干净的表面。  
确保室内光线良好。如若给他人测试，请务必戴上口罩。


打开包装，确认盒内包含上述所有物品。

使用计时器或钟表严格遵照测试步骤。(见另一面)

# 测试

1

取下试管帽，置于试管架上。

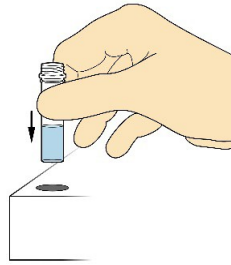

请勿接触棉签头


2

撕开棉签包装，切勿接触棉签头。




4

鼻腔取样完毕后立即将棉签插入试管中，务必使棉签接触到试管底部。搅动3-4次。

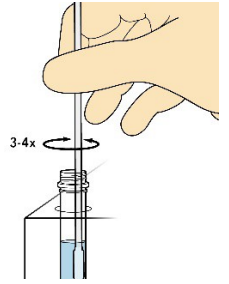


3

将棉签插入一侧鼻孔约1/2至3/4英寸深，于鼻腔内壁处旋转擦拭至少4次。使用同一棉签，插入另一侧鼻孔，重复上述动作。这一过程须15秒钟。

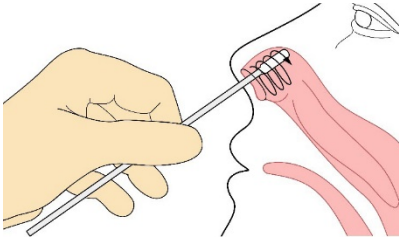

5


将棉签留置试管内至少一分钟。（使用钟表或者计时器）。留置时间过长或过短都可导致结果不准确。

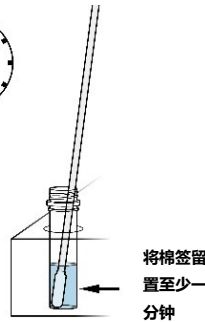

将棉签留置至少一分钟

6

一分钟后取出棉签，在试管内壁上挤压棉签，尽可能挤出所有液体。然后扔掉棉签。

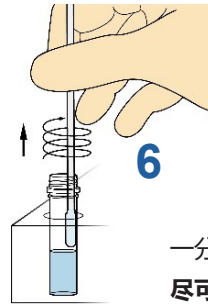


7

打开测试条包装，小心将测试条插入试管，注意箭头朝下。测试条留置10分钟（请使用钟表或计时器）。




测试条留置至少10分钟

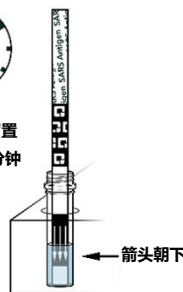

箭头朝下


8

10分钟后，立即从试管中取出测试条，置于光线良好处读取结果。如果您等待时间比规定多于5分钟以上，有可能出现错误测试结果或者检测无效。

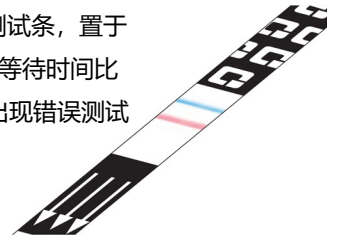

## 读取测试结果

可出现以下三种结果：**阳性**，**阴性**和**无效**，也就是说测试失败。

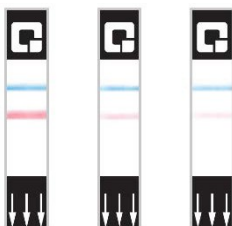

**阳性结果 =**  
1 粉线 + 1 蓝线 您有很大几率感染了新冠病毒，您应采取自我隔离。如果症状对您有影响或令您担忧，请联系您的医生。



**阴性结果 =**  
1 蓝线  
您没有感染新冠病毒。但如果您出现令人担忧的临床症状，亦请您联系家庭医生。



**无效结果 =**  
1 粉线 或没有线。您需要重新测试。使用新的试管，棉签，测试条，重新再做一次测试。若连续两次测试无效，请致电 1-833-784-2588。