

วิธีตรวจหาเชื้อโควิด-19


โดยใช้ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจที่บ้าน QuickVue At-Home OTC

เกี่ยวกับ

นี่เป็นคำแนะนำสำหรับการใช้ชุดตรวจโควิด-19 สำหรับตรวจที่บ้านแบบเข้าใจง่าย QuickVue At-Home OTC COVID-19 สำหรับข้อมูลรายละเอียด กรุณาย่านวิธีการใช้งาน และเอกสารข้อมูลผู้ป่วยภายในชุดตรวจ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกใบอนุญาตใช้ในกรณีฉุกเฉินจาก FDA



สำหรับวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไปที่ quickvueathome.com/#video_testkit-2

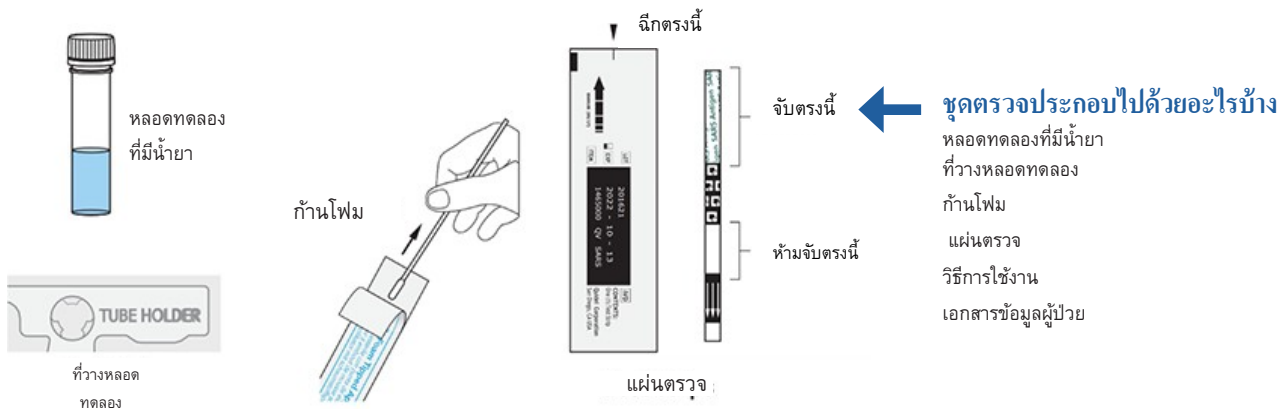

คุณจำเป็นต้องใช้อะไรอีกบ้าง

นาฬิกาจับเวลา หรือเครื่องจับเวลา (ไม่รวมอยู่ในชุดตรวจ)
ความแม่นยำในเรื่องของเวลาที่มีความสำคัญมาก
ในการใช้ชุดตรวจนี้




ก่อนเริ่มทำการตรวจ

ล้างมือให้สะอาด และวางชุดตรวจลงบริเวณพื้นผิวที่เรียบ และสะอาด และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงสว่างเพียงพอ
ภายในห้องที่ทำการตรวจ ถ้าหากคุณทำการตรวจหาเชื้อให้กับคนอื่น สวมใส่หน้ากากอนามัย
เปิดชุดตรวจ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสิ่งของตามรายการข้างต้น เตรียมเครื่องจับเวลา หรือนาฬิกาจับเวลา
และทำตามทีละขั้นตอนในหน้าถัดไป

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อโควิด-19

1

เปิดฝาของหลอดทดลองออกเพียง 1 หลอด และวางหลอดทดลองไว้ตรงที่วางหลอดทดลอง

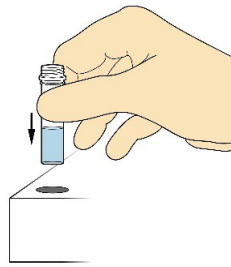

ห้ามจับหัวของ
ก้านโพม.


2

ลอกแผ่นที่ห่อหุ้มก้านโพมออก
ห้ามจับหัวของก้านโพม




4

หลังจากที่เก็บสารคัดหลั่งจาก
โพรงจมูกแล้ว นำก้านโพมใส่
ลงในหลอดทดลองที่เปิดฝา
ไว้แล้ว และต้องให้แน่ใจว่าก้าน
โพมนั้นสัมผัสกับส่วนของหลอด
ทดลอง จากนั้นหมุนก้านโพม
3 หรือ 4 ครั้ง

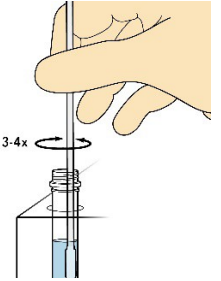


3

ใช้ก้านโพมแยงเข้าไปในโพรงจมูกประมาณ 1/2 ถึง 3/4 นิ้ว และหมุนรอบ ๆ ข้างในโพรงจมูกอย่างน้อย 4 รอบ
ใช้ก้านโพมเดิม ทำตามขั้นตอนเดิมในโพรงจมูก
อีกข้างหนึ่ง ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 15 วินาที

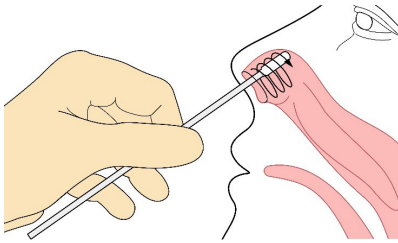

5


แช่ก้านโพมไว้ในหลอดทดลอง
อย่างน้อย 1 นาที (ใช้เครื่องจับ
เวลา หรือนาฬิกาจับเวลา) ผล
การตรวจที่ผิดพลาดอาจเกิดการ
การที่แช่ก้านโพมไว้ไม่นานพอ
หรือแช่ไว้นานเกินไป

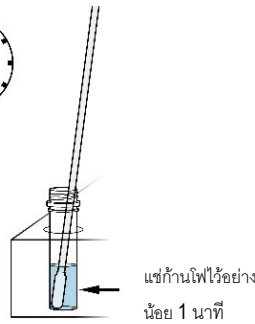

แช่ก้านโพมไว้ด้วย
อย่างน้อย 1 นาที

6

หลังจาก 1 นาทีผ่านไป นำก้านโพมออกจากหลอดทดลอง
ถูหัวไม้รอบ ๆ หลอดทดลองด้านในเพื่อที่จะบีบน้ำออก
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นำก้านโพมไปที่

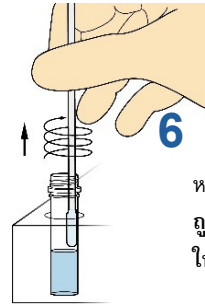


7

เปิดช่องของแผ่นตรวจอย่างระมัดระวัง และ
ใส่แผ่นตรวจลงในหลอดทดลองที่เปิดไว้ โดย
ให้ลูกศรชี้ลง จากนั้นปล่อยแผ่นตรวจทิ้งไว้ใน
หลอดทดลองเป็นเวลา 10 นาที (ใช้
เครื่องจับเวลา หรือนาฬิกาจับเวลา)



ปล่อยแผ่นตรวจทิ้ง
ไว้อย่างน้อย 10
นาที.

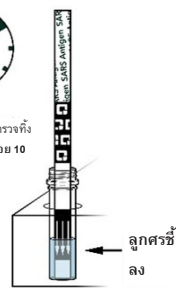

ลูกศรชี้
ลง


8

หลังจาก 10 นาทีผ่านไป นำแผ่นตรวจออกจากหลอด
ทดลอง และวางไว้บนพื้นผิวที่เรียบ และมีแสงสว่าง
เพียงพอ อ่านค่าผลตรวจทันที ถ้าหากคุณปล่อยไว้
นานเกินกว่า 5 นาทีแล้วถึงอ่านผล คุณอาจได้
ผลตรวจที่ผิดพลาด หรือใช้ไม่ได้



อ่านค่าผลตรวจของคุณ

ค่าจากผลตรวจประกอบไปด้วยทั้งหมด 3 ประเภท: ผลบวก, ผลลบ, หรือ ใช้ไม่ได้ คือผลตรวจใช้งานไม่ได้

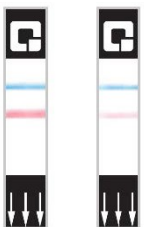

ผลตรวจเป็นบวก =

สีชมพู 1 ชีต + สีฟ้า 1 ชีต

คุณมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อโค
วิด-19 คุณควรแยกกัก

ตนเอง ถ้าหากคุณมีอาการที่ทำ
ให้คุณไม่สบายตัว หรือทำให้คุณ
กังวลใจ ติดต่อผู้ให้บริการ
สาธารณสุขของคุณ



ผลตรวจเป็นลบ =

สีฟ้า 1 ชีต

คุณมีแนวโน้มที่ไม่ติดเชื้อโค
วิด-19 แต่ถ้าหากคุณมีอาการที่ไม่
สบายตัว หรือทำให้คุณกังวลใจ
ติดต่อผู้ให้บริการสาธารณสุขของ
คุณ



ผลตรวจใช้ไม่ได้ =

สีชมพู 1 ชีต หรือ ไม่มีชีต

คุณต้องตรวจใหม่ เริ่มตั้งแต
ขั้นตอนแรกโดยใช้หลอด
ทดลอง ก้านโพม และแผ่น
ตรวจใหม่ สำหรับผลตรวจที่ใช้
ไม่ได้ถึง 2 ครั้ง ติดต่อ 1-833-
784-2588